



BABAMÉRLEG

2IN 1



KÉZIKÖNYV
EBS017

2 IN 1 BABAMÉRLEG

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyetlen részét se dobja el, amíg nem találja meg a termék összes alkatrészét.
- Semmilyen körülmények között ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga. Bízson minden javítást és beállítást egy erre szakosodott cégre/szervizre. Ennek elmulasztása a garancia érvény vesztéséhez vezethet.
- Ne tárolja és használja a terméket gyúlékony vagy illékony anyagok közelében.
- Ne tegye ki a terméket extrém melegnek, közvetlen napfénynek vagy túlzott páratartalomnak, és NE tegye túl poros környezetbe.
- Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra .
- Védje a készüléket a kemény tárgyakkal való ütközéstől, nedvességtől, portól, vegyi anyagoktól, piperecikkektől, folyékony kozmetikumtól, nagy hőmérséklet-ingadozástól és hőforrások (nyílt tűz, radiátorok) közelségétől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tegye vissza a készüléket a helyére, az elemeket távolítsa el. Ellenkező esetben szivároghatnak a készülék belsejébe, és helyrehozhatatlan károkat okozhatnak.
- Tartsa távol az erős elektromágneses terektől (pl. mobiltelefonok); ez ronthatja a mérleg pontosságát.

GYERMEKEK ÉS GYENGÉBB KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK

- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy a csomagolóanyagokat (műanyag zacskókat, dobozokat, polisztirolt stb.) tartsa távol a gyermekektől. FIGYELMEZTETÉS! Ne engedje, hogy kisgyermekek játszanak a fóliával, mert fennáll a fulladás veszélye!

Ezt a készüléket olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek elegendő ismerettel és/vagy tapasztalattal, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki felelős a biztonságukért, vagy aki utasítást kapott a készülék használatára.

- A gyermekeket mindenkor felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak az eszközzel.

SPECIFIKÁCIÓK

- 6 mm-es edzett biztonsági üveg platform
- Baba üzemmód - teherbírás: 0,2 - 20 kg
- Gyermekek üzemmód - teherbírás: 0,2 - 100 kg
- Precíziós felosztás: 0,01 kg (0,2 - 20 kg) / 0,05 kg (20,05 - 100 kg)
- Egység: KG (kilogramm) / LB:OZ (Pound: Ounce)

- Pontos mérési pontosság
- Tára funkció
- Tartó funkció
- Alacsony elem- és átlagterhelés-jelzés
- Nagy LCD kijelző kék háttérvilágítással 95-35 mm
- Tápegység: (nem tartozék)
- Automatikus és kézi kikapcsolás
- Működés közbeni hőmérséklet: 0°C - 40°C
- Tálca mérete: 32-33-7,5 cm

MÉRÉSI MÓD VÁLASZTÉK

Ez a mérleg alkalmas baba és gyermek mérésére is.

- Gyermekek esetében 100 kg-ig mér tálca használata nélkül
- Babák esetében 20 kg-ig mér, tálca használatával

PARTS DESCRIPTION

- (1) Üveg felület
- (2) ON/OFF/TARE gomb
- (3) UNIT gomb"
- (4) MEMORY gomb
- (5) Tálca
- (6) Akkumulátor tartó
- (7) Középső nyílások
- (8) Széleken lévő nyílások
- (9) Műanyag rögzítőelemek
- (10) Csavarok



ÖSSZESZERELÉS

- Fordítsa meg a tálcát. A tálca 4 oldalán 4 peremrés van, a tálca egyik oldalán pedig 2 középső rés található. Mindegyik nyílás a tálca mérlegtesthez való rögzítésére szolgál.
- Fordítsa meg a mérlegtestet. Csúsztassa az üvegplatform szélét a középső nyílásokba 30 fokos szögben. Ügyeljen arra, hogy az üvegplatform 4 sarka rögzüljön a peremrésekbe.
- Illessze a kivehető műanyag rögzítőt a lyukakhoz, és szereljen be 2 db csavart, hogy a tálcát a mérleghez rögzítse.
- Fordítsa meg a mérleget, ellenőrizze, hogy a mérleg minden irányban pontosan a helyén van-e..

MÉRÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

- Helyezze a mérleget egy egyenletes és szilárd felületre. A mérleg hátoldalán található az elemtartó rekesz. Tegye be az elemeket a rekeszbe, a rekesz belsejében feltüntetett polaritás irányát követve. Tegye vissza a fedelet.
- Nyomja meg az "ON/OFF/TARE" gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a "0.00kg", a mérleg készen áll a mérések elvégzésére.

- Nyomja meg az "UNIT" gombot, a mértékegységet a "kg", "lb/oz" között változtathatja. Válassza ki a kívánt mértékegységet, az LCD kijelzőn megjelenik a "0.00". A kiválasztott egységgel.
- Három egység áll rendelkezésre: KG (kilogramm) / LB:OZ (font: uncia). LB csak 1 digitális számot mutat, OZ 3 digitális számot mutat, míg a kilogramm 4 digitális számot mutat.
- Helyezze a babát a tálcára, a súly most már megjelenik. Ha a baba sokat mozog, a súly is gyorsan változik. Amikor a baba nyugodtabb, a súlyváltozás lassabban változik, és végül stabilizálódik. Miután a "HOLD" szó megjelenik az LCD kijelző bal sarkában, a súlysúly 3 alkalommal villog, majd a szám blokkolódik. Amikor a súly blokkolva van, akkor is, ha elveszi a babát, az LCD kijelző továbbra is ugyanazt a súlyt mutatja.

TARE FUNKCIÓ

Ha nem szeretné a babát közvetlenül a mérőfelületre helyezni, hanem inkább egy törülközőt és/vagy bármilyen más tárgyat szeretne használni, amelyet a mérés során le akar vonni, akkor használhatja a tara funkciót.

- Tegye a törülközőt a mérőfelületre, az LCD kijelzőn megjelenik a súly. A súly blokkolása után nyomja meg az "ON/OFF/TARE" gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a "0.00".
- Tegye a babát a törülközőbe vagy takaróba, a baba súlya megjelenik a képernyőn.
- Ha eltávolítja az összes tarázott tárgyat a mérlegről, az LCD kijelzőn a teljes súlyt "- " jellel jeleníti meg.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

Ha meg akarja találni az utolsó mérést, nyomja meg az "ON/OFF/TARE" gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a "0.00". Ezután nyomja meg a "MEMORY" gombot, és megjelenik az utolsó eredmény.

KIKAPCSOLÁS

Nyomja meg az "ON/OFF/TARE" gombot 3 másodpercig, a mérleg kikapcsol. Vagy a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc után, ha a baba még mindig a tálcán van.

HIBAKIJELZÉS BEVEZETÉS

- Ha a mérleg túlterhelt, a kijelzőn megjelenik az "O-LD".
- Amikor a kijelzőn megjelenik a "La", az elemeket ki kell cserélni.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás: A mérleget nedves ruhával és szükség esetén egy kis mosogatószerrel kell tisztítani.
- Soha ne merítse a mérleget vízbe, és ne öblítse folyó víz alatt.
- Tárolás: Használaton kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a mérlegre.

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a réggel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
uLPoznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

BABAMÉRLEG

Típusmegjelölés (type designation):

BAMBINO

Cikkszám (item No):

EBS015

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC 2004/108/C

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 16


Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Gyártó/Meghatalmazott képviselő

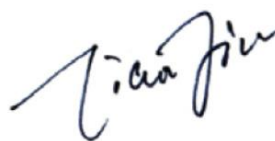

Termékmenedzser

Product Manager