



BABAMÉRLEG BEBE



**KÉZIKÖNYV
EBS019**

BABAMÉRLEG

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és semmiképp ne dobja ki a csomagolóanyagot addig, míg meg nem találta a termék összes alkotóelemét.
- Semmilyen körülmények között ne javítsa vagy változtassa meg a terméket. A felmerülő javításokat és beállításokat bízza egy erre szakosodott cégre/szolgáltatóra. Ennek elmulasztása a garancia elvesztésével járhat.
- Gyúlékony vagy illékony anyagoktól távol tárolja és használja a terméket.
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőnek, közvetlen napfénynek vagy túlzott páratartalomnak, és NE helyezzen túlságosan poros környezetbe.
- Kizárólag a céljának megfelelően használja a készüléket.
- Óvja a készüléket a kemény tárgytól, nedvességtől, portól, vegyszerektől, piperecikkektől, folyékony kozmetikumoktól, nagy hőmérsékleti ingadozástól és hőforrások közelségétől (nyílt tűz, radiátorok).
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, távolítsa el az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a termék belsejében és helyrehozhatatlan károkat okozhatnak.
- Tartsa távol az erős elektromágneses mezőktől (pl. mobiltelefonoktól). Ez ronthatja a mérleg pontosságát.

MŰSZAKI ADATOK

- Pontos mérési pontosság
- Kapacitás: 0,03-20 kg
- Mérlegosztás: 0,01 kg
- Önsúly funkció
- Megtartó funkció
- Nagy LCD kijelző kék háttérfénnyel: 60*25 mm
- Mértékegység: KG/LB/ST
- Energiaellátás: 2*AAA elem (nem tartalmazza)
- Alacsony elemfeszültség és túlterhelés jelzése
- Automatikus és kézi kikapcsolás
- Munkahőmérséklet: 0°C - 40°C
- Termék méretei: 54,5*32*3 cm

MŰKÖDÉS

Mérő és megtartó funkció

- Helyezze a mérleget egy sík és szilárd felületre. A mérleg hátlapján található az elemtartó rekesz. Helyezze be az elemeket a rekeszbe, a rekeszben jelzett polarítások irányába. Tegye vissza a fedelet.
- Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot. Az LCD kijelző az alábbiakat mutatja „HELO”. Amint a „0.00kg” megjelenik a kijelzőn, a mérleg készen áll a mérések elvégzésére.
- Nyomja meg a „UNIT/HOLD” gombot, a mértékegységet „kg”, „lb”, „st” között változtathatja. Válassza ki a kívánt mértékegységet, LCD „0.00”-t mutat a kiválasztott mértékegységben.

- Helyezze a babát a mérlegre, a súly ekkor megjelenik. Amikor a baba sokat mozog, a súly is gyorsan változik. Amikor a baba nyugodtabb és súlya egyre lassabb és lassabb változik, nyomja meg a „UNIT/HOLD” gombot, a mért súly 3-szor villog, majd a kijelzőn marad.

MEGJEGYZÉS: Amikor a kijelző a mért súlyt jeleníti meg, akkor az „ON/OFF/TARE” gomb megnyomásakor az önsúly (TARE) funkció nem működik. A mérés folytatásához nyomja meg ismét a „UNIT/HOLD” gombot a mérési eredmény feloldásához.

Önsúly funkció

Ha nem akarja a babát közvetlenül a mérőfelületre helyezni, hanem inkább törülközőt vagy más egyebet szeretne használni, melyek súlyát a mérés során le szeretne vonni, ekkor használhatja az önsúly funkciót.

- Helyezze a törülközőt a mérőfelületre, nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot, az LCD kijelzőn először „TArE” jelenik meg, majd „0.00”-t mutat.
- Tegye a babát a törülközőre vagy plédre, a baba súlya megjelenik a kijelzőn.
- Ha leveszi a törülközőt vagy plédet a mérlegről, a „- - -” fog megjelenni a kijelzőn, mert a súly adatok ebben az esetben negatívak.
- Nyomja meg ismételtén az „ON/OFF/TARE” gombot „- - -” jelzés 3 másodpercen belül eltűnik, majd „0.00” fog megjelenni a kijelzőn. Folytathatja a mérést.

Kikapcsolás

Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot 3 másodpercig, a mérleg kikapcsol. Vagy a mérleg automatikusan kikapcsol 30 másodpercet követően.

HIBAJELZÉSEK

- Ha a mérleg túlterhelt, akkor az „O-LD” jelenik meg a kijelzőn.
- Amikor a „Lo” látható a kijelzőn, akkor az elemeket ki kell cserélni.
- Ha a képernyőn „- - -” látható, ez azt jelenti, hogy a súlyeredmény negatív. Nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot, hogy újra működésbe hozza a mérleget.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás: A mérleget nedves ruhával kell tisztítani és egy kis mosófolyadékkal, amennyiben szükséges.
A mérleget soha ne merítse vízbe, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Tárolás: Ne helyezzen semmilyen tárgyat a mérlegre, ha nincs használatban.

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használatától eltérő bánásmód
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
uLPoznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

BABAMÉRLEG

Típusmegjelölés (type designation):

BAMBINO

Cikkszám (item No):

EBS015

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC 2004/108/C

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 16


Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Gyártó/Meghatalmazott képviselő

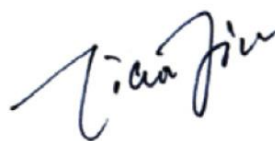

Termékmenedzser

Product Manager